


- ① 保護キャップ ② ヒーティングプレート ③ USB-C/Lightning コネクタ



Download App

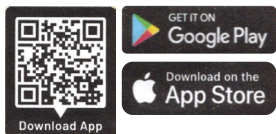

この取扱説明書はKamed社の子代理店 株式会社飯塚カンパニーが販売した製品であることを証明するものです。お買い上げの日より1年間の期間中に製造上の欠陥に起因する不具合が発生した場合には、無償にて修理もしくは交換を致します。但し不具合の原因がお客様の不適切な使用、保管上の不注意、落下、浸水、天災、当社以外での修理、改造等による場合には保証期間中といえども有償修理となります。修理や交換の際、この日本語取扱説明書、購入日のわかる領収書を製品と共に購入された販売店にお持ち込みください。これらが提出されない場合は、原則として修理、交換を受けることができません。大切に保管してください。

Apple, iPhone, Lightning は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。Made for Apple バッジの使用は、バジジで特定された Apple 製品専用 に接続するために設計され、Apple の性能基準を満たしていることが開発者によっ て証明されたアクセサリであることを意味します。Apple は、このデバイスの 動作や安全基準および規制基準への準拠について責任を負うものではありません。 このアクセサリを Apple 製品で使用すると、ワイヤレス性能に影響を与える可 能性があるにご注意ください。

Android および Google Play は、Google LLC の商標です。デザインおよび仕様は 予告なく変更されることがあります。

株式会社 飯塚カンパニー  
〒101-0032 東京都千代田区春本町2-7-11 安田ビル  
TEL 03-3862-3881 FAX 03-3862-5940  
http://www.iizukaco.co.jp email:ics@iizukaco.co.jp

アプリケーション



- ① 事前にスマートフォンにアプリをインストール
- ② ヒートイットをスマートフォンに挿し込むとアプリが起動、適切な設定を選択し開始ボタンを押す
- ③ 数秒間予熱されます
- ④ 予熱完了が表示されたら患部にヒートイットを押し当てて処置します
- ⑤ 画面に処置の完了が表示されます。

1. ヒートイットとは？

ヒートイットはスマートフォンの充電ポートに挿し込んで使用する虫さされ対策機器です。患部を約 50°C で短時間温め対処します。蚊、アブ、ハチ、スズメバチに刺されたときに使用できます。コンパクトなのでいつでもキーホルダーで持ち歩けます。

2. インストール

CE マーキングのある適切なスマートフォンとの組み合わせでのみ動作します。

1. QR コードを読み取るか、アプリストアで「ヒートイット」アプリを検索してください。
2. ヒートイットアプリをインストールする
3. スマートフォンの充電ポートにヒートイットを挿し込む
4. アプリがヒートイットの使用開始をお知らせします。

ヒートイットにはバリエーションが用意されていますので、ご注意ください：

- ・ヒートイット Lightning を使用するには iPhone 6s ~ 14 が必要です
- ・ヒートイット USB-C を使用するには、Android スマートフォン (Android 5.0 以降) または iPhone (15 以降) が必要です。
- ・スマートフォンが OTG 規格に対応している必要があります。一部のスマートフォンでは、設定で OTG を有効にする必要があります (Oppo, OnePlus, Vivo)

3. 処置の選択



**処置時間**  
SHORT, MEDIUM, LONG から選択 (4/7/9 秒)

**処置温度**  
子どもや敏感肌の大人の方は子ども (48.5°C) を選択します。敏感肌でない大人の方は大人 (51.5°C) を選択してください。敏感な方を選択すると処置温度を 1.5°C 下げることができます。

初回の処置では、SHORT、子ども、敏感な方の記号を選択してください。その後の処置では、個人の感性に応じた設定を選択する必要があります。

4. 使用方法

アプリは、ヒートイットの簡単な操作方法を案内してくれます。(図アプリケーションを参照)。

1. ヒートイットをスマートフォンに接続します。ヒートイットアプリが起動し、ヒートイットの LED が緑色に点滅します。
2. メニューで適切な設定を選択します (3 項参照)。
3. 画面下部の「開始」ボタンを押します。デバイスが数秒間予熱されます。この間、肌にヒーティングプレートをあててください。
4. 画面に予熱の完了が表示されます。スマートフォンと一緒にヒートイットのヒーティングプレートを肌の患部に押し当ててください。処置を途中で中止する場合は、ヒーティングプレートを肌から離してください。

サイン&シンボル

Transport & Storage: 70°C, -25°C  
Operating: 40°C, 5°C  
許容動作温度  
許容湿度: 700 hPa, 1060 hPa  
許容気圧: 700 hPa, 1060 hPa  
Max: 10s, 53°C  
最大処理時間と温度!

Input/Output: max. 5.25 V, max. 500 mA (USB-C, Android バージョン); max. 4.2 V, max. 300 mA (Lightning, Apple バージョン)

SN: シリアルナンバー

LOT: LOT-番号 (パッケージ参照)

IP42: デバイスは小物や水滴の浸入を防ぐ保護機能付

製造年月日 (LOT 番号に含まれる)

CE 0123: 本製品は、適用される欧州および国内の指令の要件に適合しています

本製品の耐用年数は 2 年です。廃棄方法は各地方自治体の指示に従って廃棄してください。

5. 処置の終了が画面に表示されます。これで処置は終了です。
6. 通常は必要ありませんが、再度処置をする場合は少なくとも 2 分間の休止後、処置を繰り返すことができます。
7. デバイスの電源を切るには、スマートフォンからデバイスを取り外して下さい。

5. 情報

- ・ハチの針は取り除いてからご使用ください。
- ・4 歳以上のお子様には、大人の補助があれば使用できます。12 歳以上のお子様には、ご自身で使うことができます。
- ・不安なときや初めて使用するときは、必ず「short」「子どもモード」「敏感な方」を選択してください。また、未試験の身体部位に処置する場合は同様です。
- ・ヒートイットの特別なメンテナンスは必要ありませんが、定期的に消毒用布で清掃してください。事前にヒートイットの接続を解除してください。
- ・ヒートイットは流水で洗浄したり、水につけたりしないでください。
- ・赤色の LED が点滅している場合は、アプリに正しく接続できないことを示します。最新バージョンのアプリがインストールされていること、充電ソケットに汚れがないことを確認してください。
- ・ヒートイットが保護キャップにしっかりと収まっていることをご確認ください。
- ・ヒートイットはスマートフォンと組み合わせで虫さされ対応機器となるものです。
- ・CE マークのあるスマートフォンおよび OTG アダプタにのみ接続してください。
- ・保管上の注意：長期間使用しない場合は、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。使用後はすぐにヒートイットをスマートフォンから取り外し、保護キャップにしっかりと装着し、別に保管してください。

6. 禁忌事項

- ・損傷した皮膚 (日焼けなど) や傷口にデバイスを使用しないでください。
- ・湿った肌、または軟膏、クリーム、ジェルなどを塗ったことのある肌には使用しないでください。
- ・このデバイスは、外皮専用設計されています。身体の開口部、粘膜、歯肉、爪、目、外耳道には使用しないでください。
- ・血行不良で特に敏感な皮膚部位 (例：糖尿病、静脈瘤、動脈硬化、強皮症、レイノー症状による四肢の血行不良) には使用しないでください。
- ・皮膚の熱感受性が永久的または一時的に低下している人 (例：多発性神経炎) は、装置を使用しないでください。

7. 副作用

- ・加熱プレートの熱さは、ほとんどの人が耐えられるますが、不快に感じる人もいます。
- ・過度の使用は、皮膚を傷つけたり、皮膚の持続的な変色 (「カロリック色素沈着」) を引き起こす可能性があります。
- ・敏感な人は、使用後短時間皮膚が赤くなることがあります。まれに、敏感な使用者は皮膚刺激を感じる場合があります。

8. 警告

- ・ヒートイットの処置は、医師の診察や治療に代わるものではありません。アレルギー反応 (アナフィラキシー反応) の治療には適していません。何らかの痛みや病気、疑問がある場合は、必ず医師の診断を受けてください。
- ・本装置は、病気の感染を予防したり、病気を治すことはできません。感染症の兆候がある場合は、必ず医師の診断を受けてください。
- ・本装置の使用について疑問がある場合は、必ず医師に相談してください。
- ・同じ部位への処置は 1 時間に 5 回までとしてください。
- ・同じ部位を繰り返し処置する場合は、2 分以上の間隔をあけてください。
- ・予熱中は皮膚に押し当てないでください。
- ・小さな部品を飲み込む危険がありますので、12 歳未満のお子様の手の届かないところに保管してください!
- ・機器に異常があった場合は、再度加熱せず、メーカーにご連絡ください。また、ヒートイットに関連して重大な事故が発生した場合は、各国の所轄官庁に報告してください。
- ・破損した場合は使用しないでください。
- ・ヒートイット使用中は、いかなる場合でもスマートフォンを充電しないでください。危険な電圧に触れる可能性があります。